

Instructions pour la prise du sang

S'il vous plaît effectuez la prise du sang de lundi à mercredi.

Préparation du client:

Le client ne devrait pas prendre des produits de vitamines 24 h avant la prise du sang. **Le client doit être à jeun. Cela veut dire: ne rien manger ou boire (sauf l'eau) pendant les 12 heures avant la prise du sang.**

Echantillons de sang:


- 1 tube d'héparine (tube vert)
- 2.5 ml de sérum centrifugé (tube rouge)
- 1 tube d'urine (pas nécessaire pour toutes les analyses)

Exécution:

1. Ponctionnez la veine et remplissez le tube d'héparine et de sérum avec le sang.
2. L'héparine (tube vert) doit être **tourné (pas secoué) environ 15 fois** tout de suite après la prise de sang.
3. Laissez rester le sérum pour 10 minutes. Centrifugez le tube de sérum (tube rouge) pour environ 10 minutes. Enlevez le sérum et mettez le dans le récipient d'expédition.
Important: Il faut **centrifuger le sang dans les 30 minutes après** la prise de sang.

Echantillon d'urin: voir le verso.


Urine:

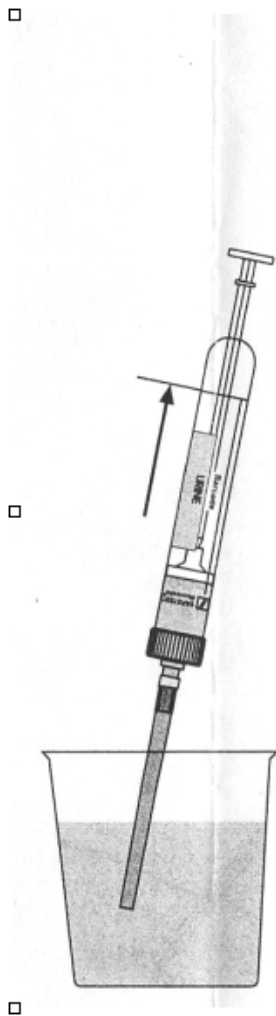

Spitze ins Gefäß eintauchen und die Monovette® bis zur Basis-Linie aufziehen.



Spitze nach oben, Monovette® senkrecht halten und weiter bis zum Anschlag nach unten aufziehen, bis Spitze entleert ist.

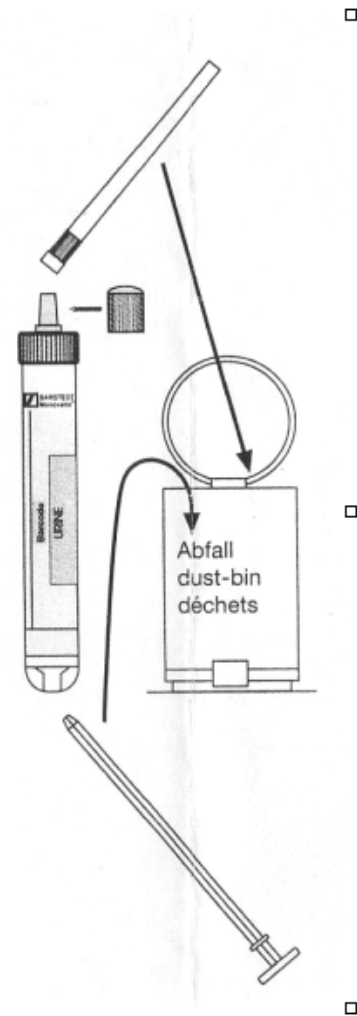

Spitze abziehen, Kolbenstange abknicken, Kappe aufsetzen.

Instructions pour l'expédition des échantillons

Réipients et couvert d'expédition

Mettez le nom du client sur tout les échantillons.

Mettez les échantillons dans les **réipients d'expédition** et enoyez les avec la **fiche d'entrée** remplie et signée dans le couvert adressé par **courier prioritaire**.

IABC AG
Esslenstrasse 3
8280 Kreuzlingen

Si vous avez besoin d'autres information, veuillez nous appeler au:

Tel: 071 666 83 80

Fax: 071 666 83 81

Mail: info@iabc.ch

Merci beaucoup.